



- 対象: 化学原料、樹脂、金属、セラミックス
- 実績: 研究開発、品質保証
- 使用例
  - 金属粒子の数、粒径分布測定
  - セラミックス粒子の粒径分布
  - 最近接の粒子間距離測定

## Image-Pro 粒子解析


Circles APP: 重なった円形粒子を分離して測定。  
Watershed: 隣接した粒子を自動分割。  
ボロノイ: 最近接の粒子間距離を測定。  
粒子間の中心線を結んだボロノイ多角形で分散性を評価。

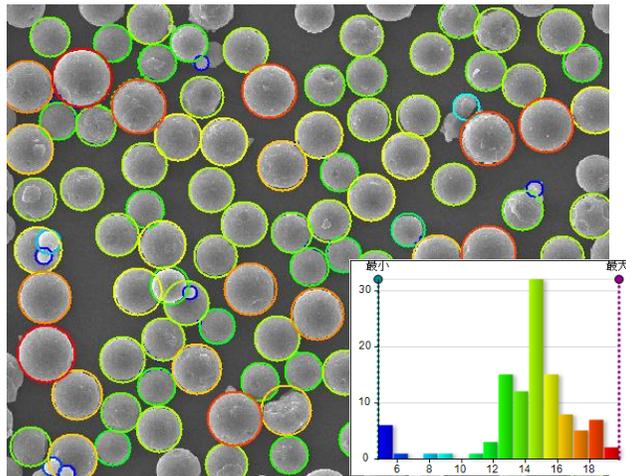

重なった粒子を分離して測定

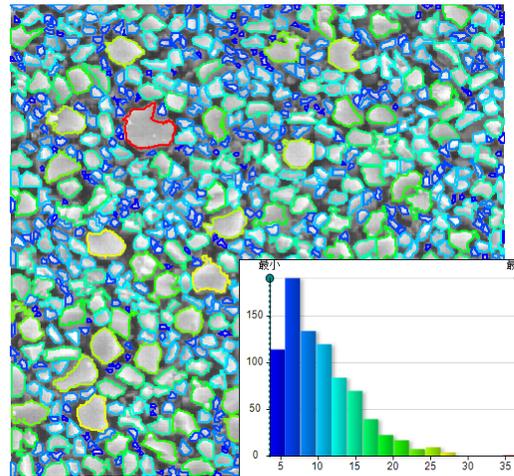

隣接粒子を自動分割して測定

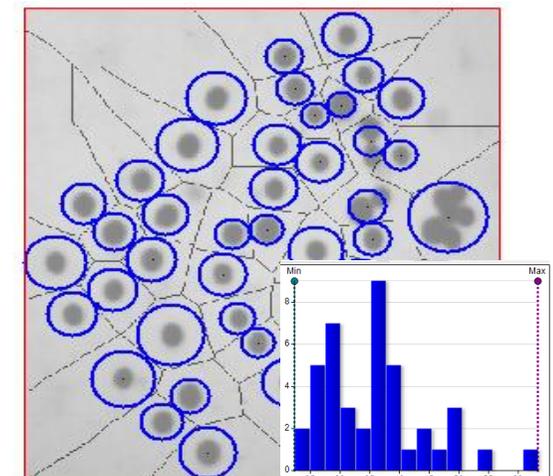

隣接粒子を自動分割して測定